

Roger™ Table Mic

מדריך למשתמש



roger

PHONAK
life is on



תוכן העניינים

1. ברוכים הבאים
2. הכירו את Roger Table Mic שלכם
 - 2.1 מה באריזה?
 - 2.2 כיצד Roger Table Mic עובד?
 - 2.3 תיאור המכשיר
 - 2.4 נוריות החיווי
3. הכנה
 - 3.1 הכנת ספק הכוח
 - 3.2 הטענת ה - Roger Table Mic
 - 3.3 הכנת השלט רחוק
 - 3.4 הפעלה וכיבוי של ה - Roger Table Mic
 - 3.5 שימוש במקלטים מסוג Roger
 - 3.6 חיבור מקלט
 - 3.7 חיבור השלט רחוק
4. שימוש ב - Roger Table Mic
 - 4.1 חיבור לאביזרי מולטימדיה
5. הוספת מיקרופונים נוספים
 - 5.1 חיבור
 - 5.2 שימוש במיקרופונים נוספים

תוכן העניינים

- 6. פונקציות מיוחדות
 - 6.1 השתקה
 - 6.2 ניתוק אביזרים מסוג Roger (NewNet)
- 7. איתור תקלות וטיפול בהן
- 8. מידע חשוב
 - 8.1 מידע בטיחותי חשוב
 - 8.2 אזהרות
 - 8.3 מידע בטיחותי אודות המוצר
 - 8.4 מידע חשוב נוסף
- 9. שירות ואחריות
 - 9.1 אחריות מקומית
 - 9.2 אחריות בינלאומית
 - 9.3 מגבלות האחריות
- 10. תיאור הסמלים

1. ברוכים הבאים

אנו מברכים אתכם על בחירתכם ב - Roger Table Mic של חברת פונאק. Roger Table Mic הוא מיקרופון אלחוטי אשר יסייע לכם להשתתף באופן פעיל בפגישות קטנות ורבות משתתפים כאחד. כל מה שעליכם לעשות הוא להניח אותו על השולחן; האביזר מבחין בין הדברים הנאמרים על ידי משתתפי הפגישה לבין רעשי הרקע, ורעשי הרקע מופחתים. העיצוב הדיסקרטי שלו מאפשר לו להיטמע באופן מושלם בין יתר פריטי הציוד שאתם מביאים אתכם לפגישה. Roger Table Mic הינו מוצר מאיכות עילית שווייצרית, אשר פותח על ידי פונאק, החברה המובילה בעולם בטכנולוגיות שמיעה.

אנא קראו הוראות שימוש אלה ביסודיות על מנת שתוכלו
להפיק תועלת מכל האפשרויות שה Roger Table Mic -
החדש שלכם מציע.
במידה ויש לכם שאלות, אנא פנו לקלינאי התקשורת
המתפל בכם.



Phonak – life is on

www.phonak.com

2. הכירו את ה - Roger MyLink שלכם

2.1 מה באריזה?



אחד או שני אביזרי
Roger Table Mic



שלט רחוק




מטען וכבל טעינה
המתאימים למדינה



מחבר RCA/Cinch



כבל אודיו

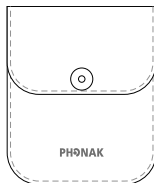

נרתיק




מדריך קצר למשתמש


2. הכירו את ה-Roger TableMic שלכם

2.2 כיצד Roger Table Mic עובד?


Roger Table Mic משדר את הקולות של משתתפי הפגישה ישירות לתוך אוזניכם. המערכת מורכבת משלושה חלקים עיקריים: מכשירי השמיעה שלכם, רסיבר מסוג Roger ואחד או יותר אביזרי Roger Table Mic.

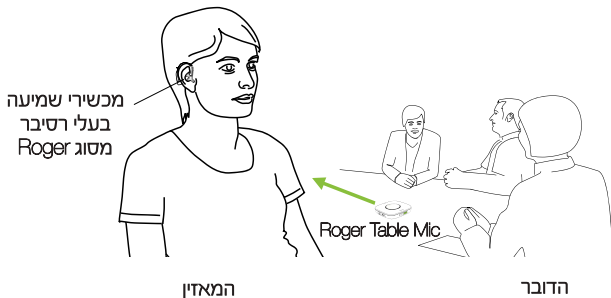

2.3 תיאור המכשיר

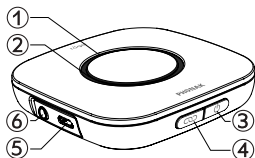

- ① נורית חיווי
- ② מיקרופונים
- ③ הפעלה / כיבוי / השתקה
- ④ חיבור
- ⑤ שקע טעינה
- ⑥ כניסת אודיו

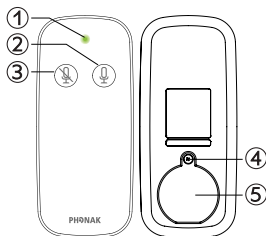

- ① נורית חיווי
- ② הפעל השתקה
- ③ הפסק השתקה
- ④ בורג
- ⑤ תא הסוללה

2.4 נוריות החיווי


משמעות	נורית חיווי
האביזר הופעל	
האביזר כבה	
מקור אודיו אותר	
המיקרופון / מקור האודיו הושתק	
בטעינה	
האביזר טעון במלואו	
הסוללה חלשה יש להטעין את ה -	
ה - Roger Table Mic איבד את החיבור למיקרופון/נים אחרים מסוג רוג'ר. לחצו על לחצן החיבור  על מנת לחדש את החיבור.	

3. הכנה

3.1 הכנת ספק הכוח

ספק הכוח האוניברסלי מגיע עם מתאם המתאים למדינה בה אתם נמצאים. על מנת להטעין את האביזר עליכם קודם כל לחבר את המתאם הנכון לספק הכוח.

1. בחרו את המתאם המתאים למדינה בה אתם נמצאים.

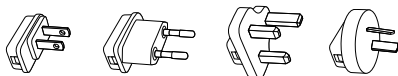


ארה"ב

אירופה

בריטניה

אוסטרליה


2. הכניסו את הקצה העליון (המעוגל) של המתאם אל הקצה העליון של ספק הכוח האוניברסלי.

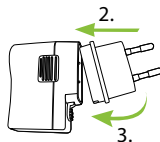


3. הקליקו את החלק את התחתון של המתאם על מנת לנעול אותו במקומו.

להסרה או שינוי המתאם:

1. דחפו כלפי מטה את הלשונית שעל גבי ספק הכוח.
2. משכו את המתאם כלפי מעלה על מנת להסירו ממקומו.

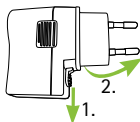

3.2 הטענת ה - Roger Table Mic

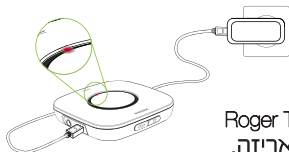

ה - Roger Table Mic כולל סוללת ליתיום פולימר מובנית - בעלת יכולות טעינה מהירה.


על מנת להטעין את ה - Roger Table Mic יש לחבר את המטען המסופק באריזה.

נורית החיווי תדלק בצבע כתום על מנת לציין שהאביזר נמצא במצב טעינה.

סוללה ריקה תיטען במלואה במשך כשעתיים. נורית החיווי תדלק בצבע ירוק, אות לכך שהטעינה הסתיימה והסוללה טעונה במלואה.

① כאשר טוענים את ה - Roger Table Mic בפעם הראשונה, יש להטעינו במשך שעתיים לפחות, גם אם נורית החיווי תדלק בצבע ירוק לפני כן.

-
1. חברו את הקצה הקטן (micro-USB) של כבל הטעינה אל ה-Roger Table Mic.
 2. חברו את הקצה הגדול יותר (USB) של כבל הטעינה אל ספק הכוח.
 3. חברו את ספק הכוח לשקע חשמלי פנוי.

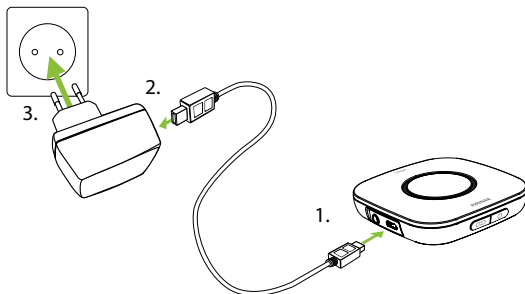

① ניתן להטעין את ה-Roger Table Mic גם על ידי חיבורו לכניסת USB של מחשב אישי, תוך שימוש בכבל הטעינה המסופק עם האביזר.

משמעות	נורית חיווי
בטעינה	
האביזר טעון במלואו	
הסוללה חלשה יש להטעין את ה-Roger Table Mic. בנוסף, יישמעו צלילים במכשירי השמיעה שלכם.	


3.3 הכנת השלט רחוק

סוללת השלט רחוק מסופקת באריזה כשהיא מוגנת באמצעות תווית מפלסטיק.

יש להסיר את תווית הפלסטיק מן הסוללה לפני הפעלת השלט רחוק.

3.4 הפעלה וכיבוי של ה - Roger Table Mic

על מנת להפעיל את ה - Roger Table Mic , לחצו על  לחצן ההפעלה והכיבוי למשך שנייה אחת, עד שנורית החיווי תדלק בצבע ירוק.

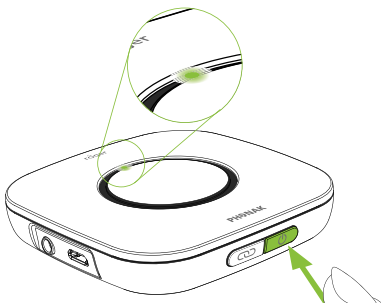


נורית חיווי (הפעלת האביזר)

נורית חיווי משמעות

הפעלת האביזר 

האביזר פועל   

3.5 שימוש במקלטים מסוג Roger

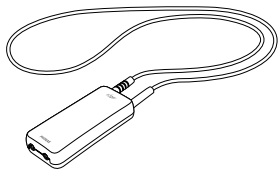


שימוש ב - Roger MyLink

אם המקלט שלכם הוא מדגם Roger MyLink, הפעילו אותו ותלו אותו מסביב לצוואר. וודאו שמכשירי השמיעה שלכם מכוונים על T / M / T-Coil.

במדריך למשתמש של ה - Roger MyLink תוכלו למצוא פרטים נוספים אודות השימוש בו.

שימוש במקלטים מסוג Roger המחוברים למכשירי השמיעה שלכם


אם יש בידיכם מקלטים מסוג Roger המחוברים ישירות למכשירי השמיעה שלכם, וודאו שהם מחוברים למכשירי השמיעה כהלכה, ושמכשירי השמיעה מכוונים לתוכנית Roger / FM / DAI / EXT.

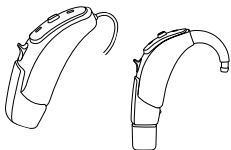

3.6 חיבור המקלטים

יתכן וקלינאי התקשורת המטפל בכם כבר ביצע חיבור של ה - Roger Table Mic למכשירי השמיעה שלכם. במידה ולא כך הדבר, חברו את המקלט שלכם אל ה - Roger Table Mic באופן הבא:

1. וודאו שה - Roger Table Mic ומקלט ה - Roger מופעלים.
2. החזיקו את ה - Roger Table Mic בטווח של עד 10 ס"מ מן הרסיבר.
3. לחצו על לחצן החיבור  של ה - Roger Table Mic.

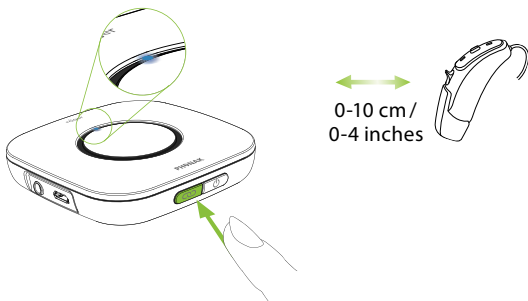

נורית החיווי תדלק בצבע ירוק למשך שתי שניות, אות לכך כי החיבור בוצע בהצלחה.

4 . חזרו על שלבים 2 ו-3 לעיל לחיבור מקלט נוסף.

① ניתן לחבר מספר אינסופי של מקלטים מסוג Roger ל - Roger Table Mic.

נורית החיווי (סטטוס פעולת ההתחברות)

לאחר לחיצה על לחצן החיבור,  המשוב הבא יתקבל באמצעות נורית החיווי:

נורית חיווי	משמעות
	מתחבר...
	פעולת החיבור עברה בהצלחה מקלט ה - Roger מחובר כעת אל ה - Roger Table Mic
	Roger Table Mic לא מצא מקלט Roger . נסו לקרב את ה - Roger Table Mic אל מקלט ה - Roger וודאו שהמקלט מופעל. נסו לבצע את פעולת ההתחברות שוב.
	מקלט ה - Roger אינו תואם ל - Roger Table Mic

3.7 חיבור השלט רחוק

השלט רחוק מחובר אל ה - Roger Table Mic כבר בעת הייצור במפעל. במידת הצורך, ניתן לחבר את השלט רחוק לכל כמות של אביזרי Roger Table Mic.

1. לחצו על לחצן כלשהו של השלט רחוק והמשיכו ללחוץ.
2. הפעילו את ה - Roger Table Mic על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה. 

נורית החיווי של ה - Roger Table Mic תהבהב בצבע סגול 4 פעמים, סימן שההתחברות הצליחה.

3. שחררו את הלחצן של השלט רחוק.
נורית החיווי (סטטוס פעולת ההתחברות)

לאחר חיבור השלט רחוק, המשוב הבא יתקבל באמצעות נורית החיווי:

משמעות	נורית חיווי
--------	-------------


פעולת החיבור עברה בהצלחה



4 . שימוש ב - Roger Table Mic

Roger Table Mic הינו מוצר חכם וגמיש. הוא מזהה את הסיטואציה בה אתם נמצאים ומתאים את הגדרות עיבוד הצלילים שלו על מנת לספק לכם את חוויית השמיעה המיטבית.


הניחו את ה - Roger Table Mic באמצע השולחן על מנת לשמוע את השיחה בקבוצה של אנשים.

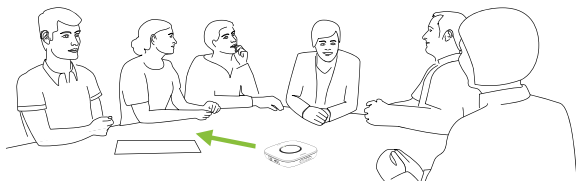

❶ לקליטה מיטבית של הקולות, הימנעו מלהניח את ה - Roger Table Mic קרוב מדי למקורות רעש, כגון מחשבים ניידים או מקרנים.

4.1 התחברות לאביזרי מולטימדיה

ניתן לחבר את ה - Roger Table Mic למקור אודיו כגון טלפון המשמש לשיחת ועידה, למחשב לוח או למחשב אישי על מנת לשמוע את הקולות ישירות במכשירי השמיעה שלכם.

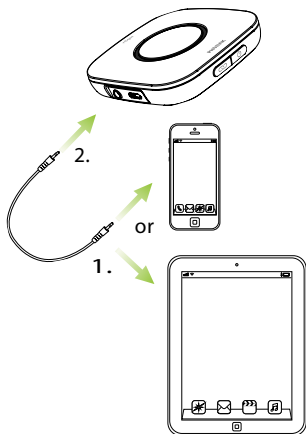

1. חברו קצה אחד של כבל האודיו אל כניסת ה-Aux של ה - Roger Table Mic.

2. חברו את הקצה השני ליציאת האודיו של מקור האודיו.

❗ לאחר הפעלת אות האודיו של אביזר המולטימדיה אליו התחברתם, Roger Table Mic יזהה את האותות וישתיק את המיקרופון שלו.


5. הוספת מיקרופונים נוספים

הטכנולוגיה של Roger מאפשרת לכם להשתמש במספר מיקרופונים במקביל, וזאת על ידי פעולת חיבור מיקרופונים נוספים.

5.1 חיבור

על מנת לחבר מיקרופון נוסף אל ה - Roger Table Mic , בצעו את הפעולות הבאות:

1. הפעילו את שני המיקרופונים.
2. החזיקו את שני המיקרופונים במרחק שאינו עולה על 10 ס"מ האחד מן השני.
3. לחצו על החיבור  של ה - Roger Table Mic.

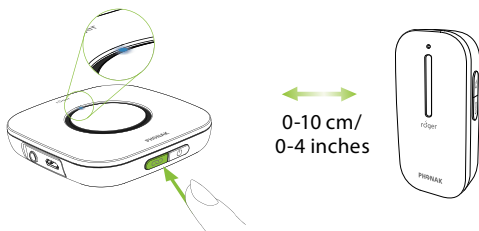

נוריות החיווי של שני המיקרופונים ידלקו בצבע ירוק במשך 2 שניות, אות לכך כי ההתחברות הצליחה.

① ניתן לחבר עד 10 מיקרופונים מסוג Roger ל - Roger Table Mic.

① במידה ואתם מעוניינים לחבר Roger Pen ל - Roger Table Mic, לחצו על לחצן החיבור של ה - Roger Pen במקום על לחצן החיבור של ה - Roger Table Mic.

נורית החיווי (סטטוס פעולת ההתחברות)

לאחר הלחיצה על לחצן החיבור **כא**, המשוב הבא יתקבל באמצעות נורית החיווי:

נורית חיווי משמעות

פעולת החיבור עברה בהצלחה המיקרופון
הנוסף מחובר כעת אל - ה - Roger Table Mic



Roger Table Mic לא איתר מיקרופון נוסף. הניחו
את ה - Roger Table Mic קרוב יותר למיקרופון
הנוסף וודאו ששני המיקרופונים מופעלים.
נסו לבצע את פעולת ההתחברות שוב.



המיקרופון הנוסף אינו תואם ל - Roger Table Mic.
אנא בצעו פעולת עדכון תוכנה באמצעות Roger
Upgrader או צרו קשר עם קלינאי התקשורת
המטפל בכם.




5.2 שימוש במיקרופונים נוספים

במידת הצורך הניחו Roger Table Mic נוספים באופן שתוכלו לשמוע היטב את כל היושבים מסביב לשולחן. בנוסף ניתן למסור לדוברים מיקרופונים לבישים מסוג Roger על מנת שיענדו אותם.

וודאו שהם נלבשים כהלכה (מופנים כלפי פיו של הדובר, במרחק שאינו עולה על 20 ס"מ).

מיקרופונים מסוג Roger מזהים באופן אוטומטי כאשר מישהו מדבר, ואז הם משדרים את הקולות ישירות אל מכשירי השמיעה שלכם.

במידה ואחד הדוברים העונד מיקרופון מעוניין לעזוב באופן זמני את הקבוצה, עליו להשתיק את המיקרופון שלו באמצעות לחיצה יציבה על לחצן ההפעלה והכיבוי.

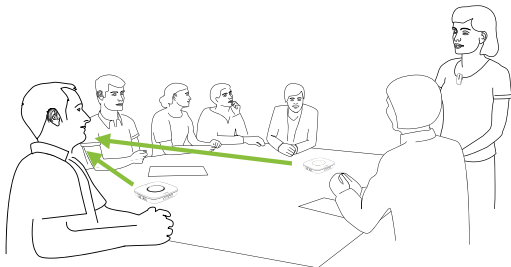

במידה ויש בעיה ברשת, לחצו על לחצן החיבור 📶 של אחד המיקרופונים על מנת לאתחל את הרשת.

נורית החיווי (סטטוס ריבוי מיקרופונים)

כאשר עושים שימוש ביותר ממיקרופון אחד מסוג Roger, המשוב הבא יתקבל באמצעות נורית החיווי:

נורית חיווי משמעות


המיקרופון מושתק. הפעל אותו מחדש באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה והכיבוי ⏻, או באמצעות לחצן ביטול ההשתקה על השלט רחוק.

Roger Table Mic איבד את הקשר אל המיקרופון/
נים האחרים. לחצו על לחצן החיבור 📶 על מנת
לחדש את פעולת הרשת.



6. פונקציות מיוחדות

6.1 השתקה

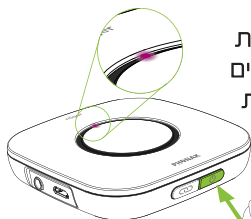

השתקת המיקרופון יעילה במיוחד בעת הפסקה בפגישות, או כאשר אתם רוצים להתמקד בדברי המרצה ללא הפרעות מצדם של משתתפים אחרים.

1. לחצו ביציבות על לחצן ההפעלה והכיבוי ⏻ או על לחצן ההשתקה על השלט רחוק על מנת

להשתיק את המיקרופון של ה - Roger Table Mic. כאשר האביזר הושתק, נורית החיווי תדלק בצבע סגול יציב.

2. לחצו שוב על לחצן ההפעלה והכיבוי ⏻ או על לחצן ההשתקה על השלט על מנת להפעיל מחדש את המיקרופונים של ה - Roger Table Mic.


נורית החיווי (השתקה)

משמעות נורית חיווי

המיקרופון מושתק.



6.2 ניתוק אביזרים מסוג Roger (NewNet)

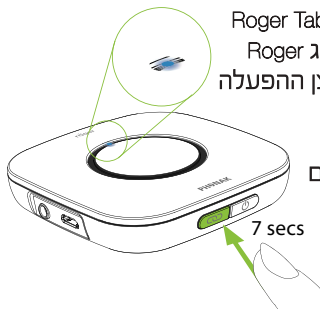

על מנת לנתק את ה - Roger Table Mic
מרסיברים או מיקרופונים מסוג Roger
המחוברים אליו, לחצו על לחצן ההפעלה
והכיבוי ⏻ במשך 7 שניות.

נורית החיווי תדלק בצבע כתום
כאשר ה - Roger Table Mic
התנתק מכל האביזרים
המחוברים אליו.

כעת ניתן לחבר מחדש רסיברים או מיקרופונים
אל ה - Roger Table Mic.

איפוס

במידה וה - Roger Table Mic מפסיק להגיב לפקודות, ניתן
לאפס אותו על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה והכיבוי ⏻
ולחצן החיבור 📶 בעת ובעונה אחת למשך 10 שניות

7 . איתור תקלות וטיפול בהן

הפתרון	הגורמים
אינני יכול להפעיל את ה - Roger Table Mic	
הטעינו את ה - Roger Table Mic במשך שעותיים לפחות	הסוללה ריקה לגמרי
אינני יכול לשמוע את הדובר	
הדיוז את ה - Roger Table Mic קרוב יותר אל הדובר	המיקרופון אינו ממוקם כהלכה
וודאו שפתחי המיקרופון אינם מכוסים בכלכלוך או מוסתרים תחת חפץ כלשהו	פתחי המיקרופון מכוסים בכלכלוך או מוסתרים תחת חפץ כלשהו
אינני יכול לשמוע את קולו של הדובר אף על פי שה - Roger Table Mic מופעל	
בדקו את נורית החיווי אם היא דולקת - בצבע סגול, לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה והכיבוי על מנת להפעיל את המיקרופונים	המיקרופון הושתק
וודאו שמכשירי השמיעה מכוונים לתוכנית המתאימה (Roger / FM / DAI / EXT / AUX)	מכשירי השמיעה אינם מכוונים אל התוכנית המתאימה
וודאו שה - Roger Table Mic נמצא קרוב לכל אחד מן המקלטים בתורו, ולחצו על לחצן החיבור	מקלטים מסוג Roger אינם מחוברים אל ה - Roger Table Mic
לחצו על לחצן החיבור על ה - Roger Table Mic	ה - Roger Table Mic היה חלק מרשת

7. איתור תקלות וטיפול בהן

הפתרון	הגורמים
אני כל הזמן מאבד את אות האודיו	
התקרבו אל ה - Roger Table Mic	ה - Roger Table Mic והמקלט רחוקים מדי זה מזה
וודאו שה - Roger Table Mic נמצא בטווח הראייה שלכם	קיים מחסום פיזי בינכם לבין ה - Roger Table Mic
עוצמת הקול של מכשיר המולטימדיה נמוכה מדי	
הגבירו את עוצמת הקול	עוצמת הקול לא מכוונת כהלכה
אינני יכול לשמוע את מכשיר המולטימדיה	
בטלו את מצב ההשתקה של מקור הקול	מקור הקול הושתק
בטלו את מצב ההשתקה של ה - Roger Table Mic	ה - Roger Table Mic הושתק
הפעילו את ה - Roger Table Mic על מנת להאזין למקור הקול דרך כבל האודיו	ה - Roger Table Mic משתמש בכבל האודיו אך הוא אינו מופעל
עוצמת הקול של מכשיר המולטימדיה נמוכה מדי	
הגבירו את עוצמת הקול	עוצמת הקול לא מכוונת כהלכה
נורית החיווי של ה - Roger Table Mic מהבהבת בצבע אדום (הבהוב כפול)	
הטעינו את ה - Roger Table Mic בהקדם האפשרי	הסוללה חלשה

7. איתור תקלות וטיפול בהן

הפתרון	הגורמים
Roger Table Mic הפסיק לפעול	
▪ קיימת בעיית תוכנה ▪ אתחלו מחדש את ה - Roger Table Mic באמצעות לחיצה סימולטנית על לחצן ההפעלה והכיבוי ועל לחצן החיבור	
אני לא מצליח לחבר את ה - Roger Table Mic למיקרופון Roger אחר	
▪ קיימת חוסר תאימות בתוכנה ▪ שדרגו את כל המיקרופונים באמצעות Roger Upgrader הזמין האתר של חברת פונאק, או צרו קשר עם קלינאי התקשורת המטפל בכם	
איני יכול לחבר את ה - Roger Table Mic עם מיקרופון Roger אחר	
▪ המיקרופון אינו פועל ▪ המיקרופון אינו קרוב מספיק ▪ רשת המיקרופון איננה תקינה	▪ וודאו ששני האביזרים מופעלים ▪ קרבו את המיקרופון אל ה - Roger Table Mic ▪ לחצו לחיצה ארוכה על לחצן החיבור על אחד המיקרופונים על מנת לאתחל את הרשת
השלט רחוק אינו מגיב	
▪ החליפו את הסוללה (מסוג CR2032)	▪ הסוללה ריקה

8. מידע חשוב

8.1 מידע בטיחותי חשוב

 אנא קראו את המידע המופיע בעמודים הבאים לפני השימוש.

 סמל זה על גבי המוצר או האריזה משמעו שחל איסור להשליך את המוצר לפסולת הביתית הרגילה. מאחריותכם להשליך ציוד מסוג זה בנפרד מן האשפה הביתית. הדבר יסייע למנוע השלכות שליליות על הסביבה ועל בריאותם של בני אדם.

8.2 אזהרות

⚠ שימרו על אביזר זה מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 3.

⚠ פתיחת המוצר עלולה לגרום לו נזק. במידה ונתקלתם בבעיה שאינכם יכולים לפתור באמצעות הפרק אודות תקלות והטיפול בהן, אנא פנו אל קלינאי התקשורת המטפל בכם.

⚠ במידת הצורך, יש למסור את המוצר לתיקון במרכז שירות מורשה. חל איסור לבצע שינויים או עדכונים באביזר זה ללא אישור מפורש של חברת פונאק.

⚠ אנא היפטרו ממכשירים או אביזרים חשמליים רק בהתאם לתקנות המקומיות החלות עליכם.

⚠ הימנעו משימוש באביזר זה במקומות בהם אסור השימוש בצידוד אלקטרוני. במידה ויש לכם ספק, התייעצו עם האחראי.

⚠ אין להשתמש באביזר זה במטוסים אלא אם כן הדבר אושר על ידי אחד מאנשי הצוות.

⚠ יש לחבר אביזרים חיצוניים רק במידה והם נבדקו ונמצאו מתאימים לפי תקני האיחוד האירופי IECXXXX.

⚠ השתמשו רק באביזרים אשר אושרו על ידי חברת פונאק.

⚠ השימוש בכבלים באופן הנוגד את השימוש המיועד להם (לדוגמא: ענידת ה - mini USB מסביב לצוואר) עלולה לגרום לפציעה.

⚠ כאשר אתם מפעילים מכונה מסוימת, וודאו שאף אחד מן החלקים של האביזר לא ייתפס במכונה.

⚠ הימנעו מטעינה של האביזר כשהוא על גופכם.

זהירות: סכנת התחשמלות. אל תכניסו את התקע לשקע חשמלי כשהוא אינו מחובר לאביזר.

⚠ הימנעו משימוש באביזר באזורים המועדים לפיצוץ (סביבה עשירה בחמצן, מכרות או אזורי תעשייה בעלי סיכון להתפוצצויות).

8.3 מידע בטיחותי אודות המוצר

- ① הגנו על אביזר זה ממכות וזעזועים.
- ① הימנעו מחשיפת האביזר לטמפרטורות או תנאי לחות קיצוניים, העולים על ההמלצות המופיעות במדריך זה.
- ① לעולם אל תשתמשו במכשיר מיקרוגל או מתקני חימום אחרים לייבוש האביזר.
- ① נגבו את האביזר באמצעות מטלית לכה. הימנעו משימוש במוצרי ניקוי ביתיים (כגון סבון כביסה, סבון, וכו') או באלכוהול לניקוי האביזר.
- ① הטעינו את האביזר אך ורק באמצעות מטענים אשר סופקו על ידי חברת פונאק או מטענים יציבים המספקים 5 VDC וזרם => 500 mA.
- ① הימנעו מחיבור האביזר לכבל USB או כבל אודיו הארוך מ - 3 מטרים.
- ① כאשר האביזר איננו בשימוש, כבו אותו ואחסנו אותו במקום בטוח.

① הגנו על האביזר מלחות רבה (כגון בעת רחצה או שחייה), מחום (כגון תנורי חימום, לוח השעונים של המכונית), וממגע ישיר עם העור בעת הזעה מרובה (כגון בחדר כושר או באירוע ספורטיבי).

① בדיקות רנטגן, CT או MRI עלולות לקלקל או לגרום לנזק בלתי הפיך לפעולתו התקינה של האביזר.

① הימנעו מהפעלת כוח רב מדי בעת חיבור האביזר לכבלים השונים שלו.

① חברו את האביזר אל תחנת העגינה שלו כפי שמתואר בהוראות. חיבור שלא לפי ההוראות עלול לגרום לנזק לאביזר.

① הגנו על כל הפתחים (פתחי המיקרופון, פתח כניסת הקול ושקע המטען) מלכלוך ופסולת.

① במידה והאביזר נפל או ניזוק, אם הוא מתחמם מדי במהלך ההטענה, אחד הכבלים שלו ניזוק, או אם הוא נרטב בטעות, הפסיקו את השימוש וצרו קשר עם קלינאי התקשורת המטפל בכם.

① האביזר מצויד בסוללה נטענת משולבת. סוללה זאת יכולה להתרוקן ולהיטען מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. במקרה זה יש להחליף את הסוללה רק בתחנת שירות מורשית.

8.4 מידע חשוב נוסף

- אנשים בעלי קוצבי לב או מכשירים רפואיים אחרים חייבים להתייעץ עם הרופא שלהם או יצרן המכשור לפני השימוש באביזר. השימוש באביזר ביחד עם קוצב לב או מכשירים רפואיים אחרים חייב להיות תואם להמלצות הבטיחות של הרופא האחראי על הקוצב או יצרן הקוצב.
- האביזר אוגר ומאחסן מידע טכני פנימי. מידע זה עשוי להיקרא על ידי קלינאי תקשורת מוסמך על מנת לבדוק את האביזר ולסייע לכם להשתמש בו כהלכה.
- האות הדיגיטלי המשודר מן האביזר לרסיבר המחובר אליו אינו יכול להישמע על ידי אביזרים אחרים אשר אינם נמצאים ברשת של המיקרופון.

9. שירות ואחריות

9.1 אחריות מקומית

אנא פנו אל קלינאי התקשורת המטפל בכם, אצלו רכשתם את האביזר, אודות תנאי האחריות המקומית.

9.2 אחריות בינלאומית

חברת פונאק מציעה אחריות בינלאומית מוגבלת של שנה אחת התקפה החל מתאריך הרכישה. האחריות מכסה תיקונים במקרים של פגם בחומרים או בתהליך הייצור. אחריות זו תהא תקפה עם הצגת קבלה או תעודת אחריות בלבד.

9.3 הגבלת אחריות

אחריות זאת לא תכסה מקרים בהם המכשיר נפגם כתוצאה משימוש או טיפול לא הולמים, חשיפה לחומרים כימיים, השרייה בנוזלים או הפעלת כוח לא נחוץ במקרים של נזק הנגרם על ידי צד שלישי או שירות לא מורשה, האחריות הניתנת על ידי חברת פונאק לא תהיה תקפה. אחריות זו אינה מכסה שירותים הניתנים על ידי מכון השמיעה.

מספר סידורי:

תאריך הרכישה:

קלינאי התקשורת המורשה (חותמת / חתימה):

10. תיאור הסמלים

9.3 הגבלת אחריות

באמצעות סמל CE, פונאק AG מאשרת שמוצר זה של החברה כולל האביזרים הנלווים עומדים בדרישות הנחיית המכשור הרפואי EEC/93/42 וכן בדרישות של ההנחיה לציוד רדיו ותקשורת אלקטרונית EC/1999/5.



סמל זה מציין שחשוב לקרוא את המידע הרלבנטי במדריך זה ולהתחשב בו.



סמל זה מציין שחשוב למשתמש לשים לב להתראות המופיעות במדריך זה.



מידע חשוב לבטיחות השימוש במכשיר.



תנאי הפעלה
המוצר מתוכנן באופן שהוא פועל ללא תקלות או מגבלות במידה ומשתמשים בו בהתאם להנחיות השימוש, אלא אם מצוין אחרת במדריך.

טמפרטורת ההפעלה: בין 0 ל +40 מעלות צלסיוס (+32 עד +104 מעלות פרנהייט). טמפרטורת האחסון: בין - 10 ל +60 מעלות צלסיוס (+14 עד +140 מעלות פרנהייט).



תנאי לחות במהלך המשלוח: עד 90% (ללא עיבוי).
תנאי לחות בזמן האחסון: 0% עד 70% , במידה ולא בשימוש.



לחץ אטמוספרי: hPA 500 עד hPA 1100





סמל זה מפנה את תשומת לבכם לעובדה שחל איסור להשליך אביזר זה יחד עם הפסולת הביתית הרגילה. אנא היפטרו מאביזרים ישנים או כאלה שאינם בשימוש במיקום המיועד לפסולת אלקטרונית, או מסרו אותם לקלינאי התקשורת המטפל בכם. הדבר יסייע לסביבה ולבריאותכם. אביזר זה מצויד בסוללה מובנית, שאינה ניתנת להחלפה. אל תנסו לפתוח את המוצר או להוציא את הסוללה, מאחר והדבר עלול לגרום לפציעתכם ולנזק למוצר.



Phonak Communications AG
Laenggasse 17
CH-3280 Murten
Switzerland

www.phonak.com

