


myPhonak Junior 1.2

מדריך למשתמש

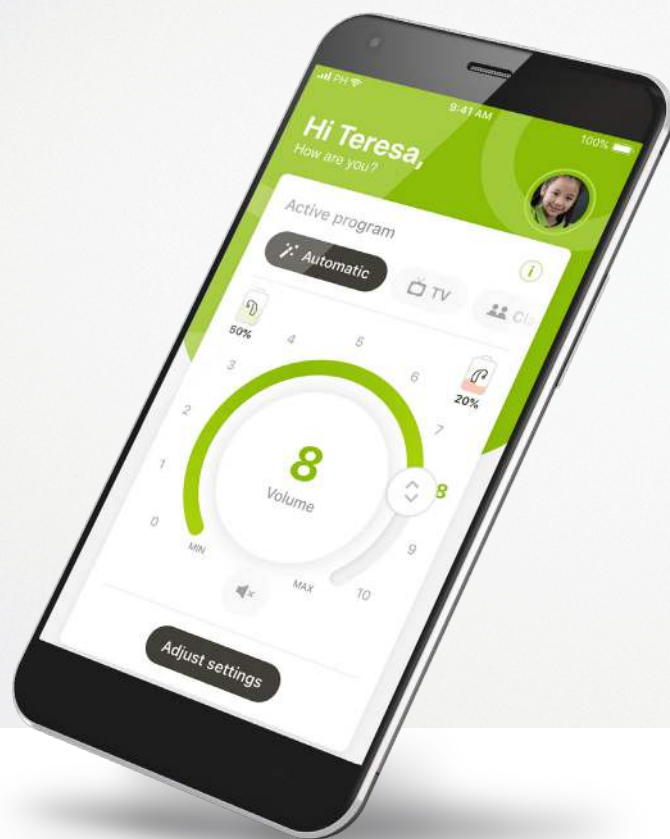

תחילת עבודה

myPhonak Junior הוא יישום שפותח על-ידי Sonova, מובילה עולמית בפתרונות שמיעה הנמצאת בציריך, שווייץ. יש לקרוא היטב את ההוראות למשתמש כדי ליהנות מכל האפשרויות שהיישום מציע.



מידע בנושאי תאימות:

לשימוש ביישום myPhonak Junior, נדרשים מכשירי שמיעה מבית Phonak עם קישוריות Bluetooth®. אפשר להשתמש ב-myPhonak Junior בטלפונים עם יכולות Bluetooth® low energy (LE) והוא תואם למכשירים המריצים מערכת הפעלה iOS® בגרסה 14.0 או מתקדמת יותר. אפשר להשתמש ב-myPhonak Junior בהתקני Android™ מורשי Google Mobile Services (GMS) התומכים ב-Bluetooth® 4.2 ו-Android OS 8.0 וגרסאות מתקדמות יותר.

הסימן המסחרי והסמלים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בסימנים אלה על-ידי Sonova AG נעשה ברישיון.

iPhone® הוא סימן מסחרי של Apple Inc., הרשום בארה"ב ובארצות אחרות.

Android הוא סימן מסחרי של Google LLC.

iOS® הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Cisco Systems, Inc. ו/או שותפותיה בארצות הברית ובארצות מסוימות אחרות.



מדריך זה למשתמש מתאר את התכונות של יישום myPhonak Junior, וכיצד המשתמש יכול להפעיל תכונות אלו. הוא גם מתאר כיצד לחסום תכונות מסוימות עבור ילדים באמצעות נעילת הורים, כדי שניתן יהיה להשתמש בתכונות אלו רק בליווי הורה. קראו את המדריך למשתמש עד סופו לפני תחילת השימוש ביישום.



לילדים שונים יש התפתחות קוגניטיבית שונה, אפילו אם הם באותו גיל. כדי להעריך האם הילד מתאים לשימוש ב-myPhonak Junior יש להעריך את רמת הבשלות ואת המודעות לסיכון אצל כל ילד על בסיס אישי. ניתן להשתמש בהמלצות הבאות כמדריך:



שימוש עצמאי בשלט-רחוק:
ילדים מגיל 10 ומעלה שיכולים לקבל החלטות מודעות לגבי האופן שבו הגדרות היישום ישפיעו על השמיעה שלהם ועל המודעות שלהם לצלילים מסביב.



חיוני שתהיה לילד יכולת לקרוא ולהבין הודעות אזהרה.



שימוש נתמך בשלט-רחוק:
ילדים מגיל 6 ומעלה שיכולים לספק משוב ברור לגבי שינויים או התאמות שנעשו על ידי צד שלישי באמצעות היישום. בתרחיש זה, הורים/מטפלים יכולים לבצע שינויים לטובתו של הילד.




הערה: חשוב מאוד שההורים/מטפלים לא יבצעו שינויים אלא אם הילד מסוגל לספק משוב אמין.


תוכן העניינים

4	סקירה מהירה
6	התקנת היישום myPhonak Junior
7	צימוד עם מכשירי שמיעה תואמים
9	בקרת הורים
10	התאמה אישית
11	פתרון בעיות בצימוד
12	שלט רחוק
13	פעילות תמיכה מרחוק
15	מכשירי השמיעה שלי
16	מידע בנושא בטיחות ותיאור הסמלים
20	הסברים על הסמלים

סקירה מהירה - שלט רחוק

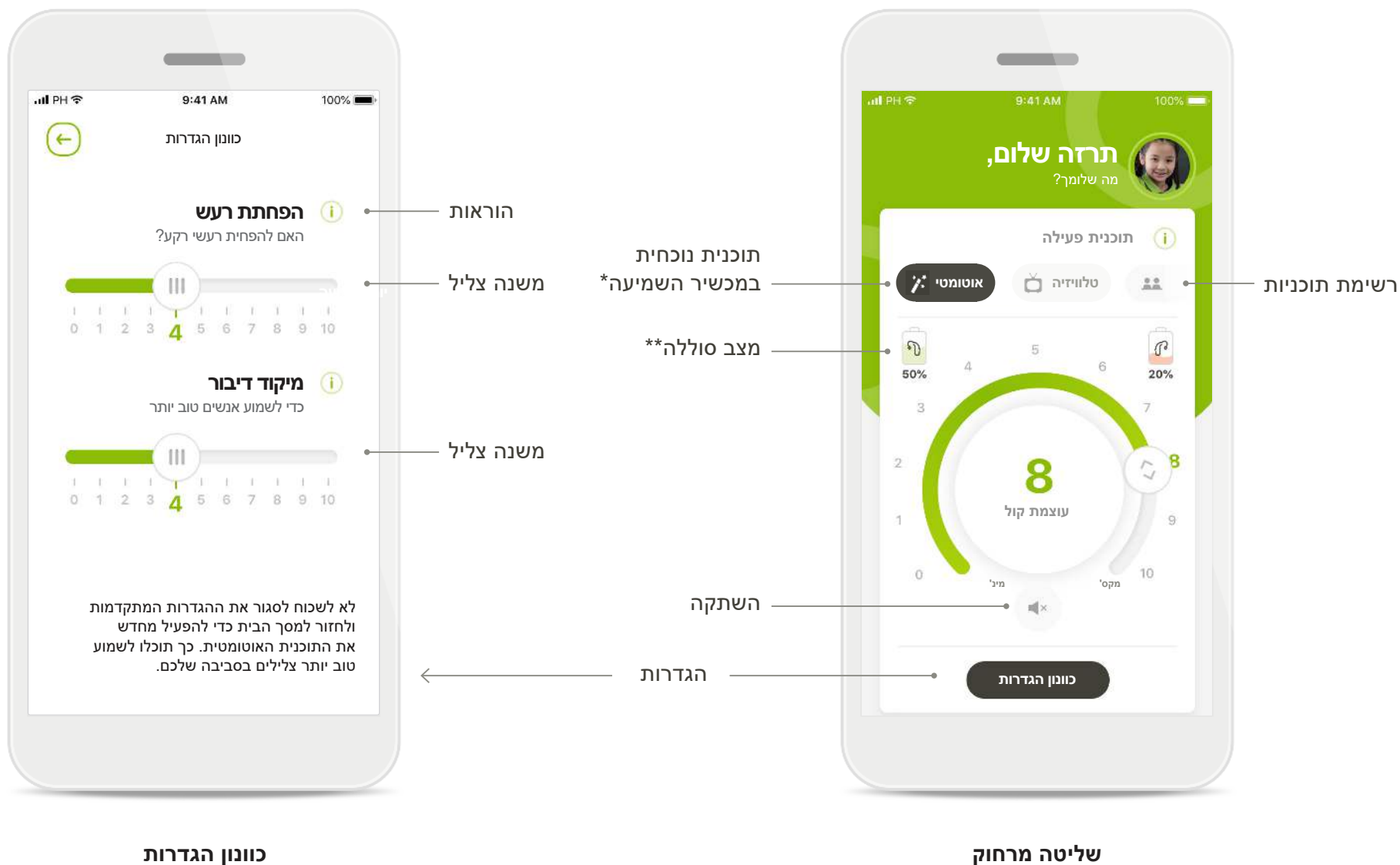


סקירה מהירה - תמיכה מרחוק*

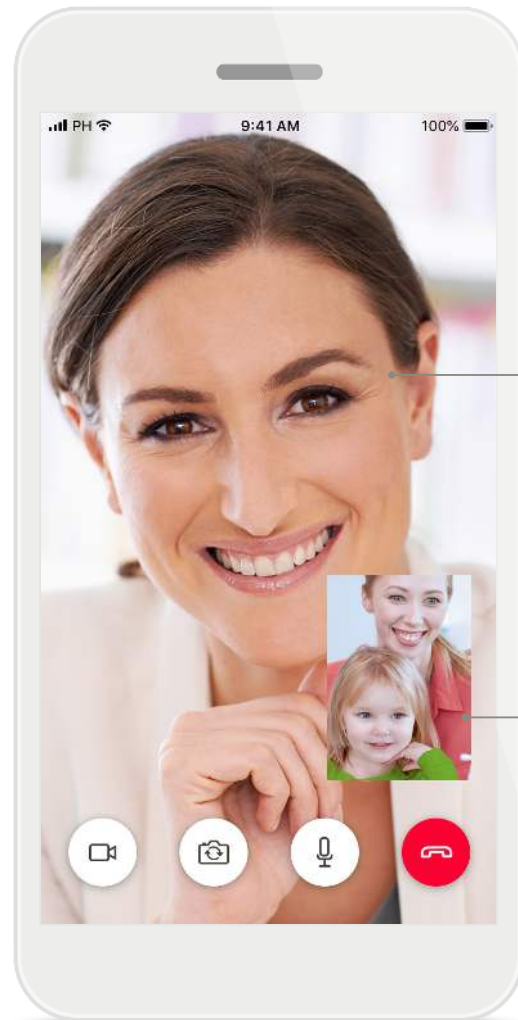

הווידאו של קלינאי
התקשורת

הווידאו שלכם

שיחת תמיכה מרחוק

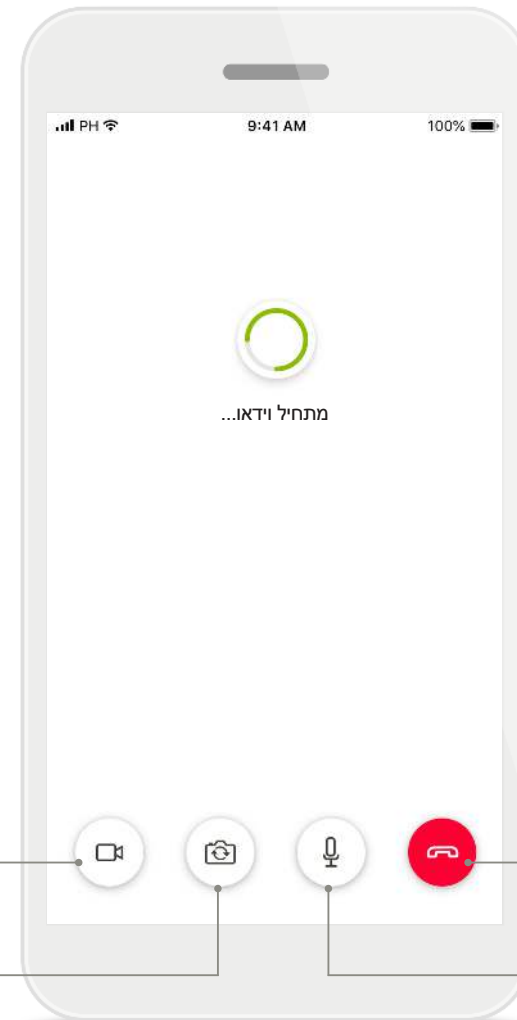

ווידאו
פועל/כבוי

תצוגת
מצלמה

סיום שיחה


מיקרופון פועל/כבוי

שיחת תמיכה מרחוק


*זמין בארצות מסוימות בלבד ודרך קלינאי תקשורת נבחרים

התקנת יישום myPhonak Junior

- חברו את הטלפון החכם לאינטרנט דרך Wi-Fi או נתונים סלולריים
- הפעילו את Bluetooth בטלפון החכם

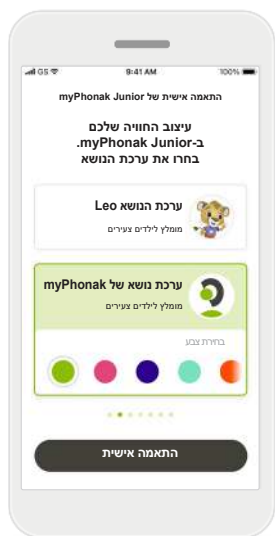


בחירת ערכת נושא
הורים, מטפלים או משתמשי היישום יכולים לבחור בין ערכת הנושא 'Leo' או 'myPhonak'. בשתי ערכות הנושא יש את אותן תכונות של היישום. אפשר לבחור את ערכת הנושא במהלך ההצטרפות או ב'הפרופיל שלי'.

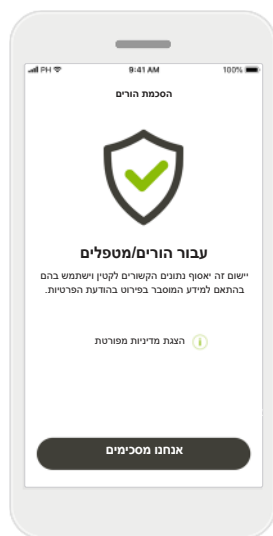


הוספת הורים
כהורה או מטפל, עליכם לאשר את הסמכת ההורים כדי להשתמש ביישום. היישום myPhonak Junior יאסוף נתונים הקשורים לקטין וישתמש בהם בהתאם למידע המוסבר בפירוט בהודעת הפרטיות.



הודעת פרטיות
כדי להשתמש ביישום, עליכם להקיש על **אנחנו מסכימים** על-מנת לקבל את הודעת הפרטיות ולהמשיך.

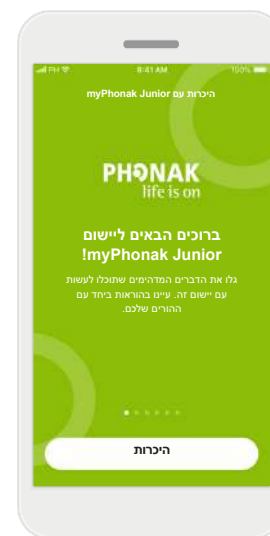


פתחו את myPhonak Junior
פתחו את היישום ולחצו על **היכרות**.

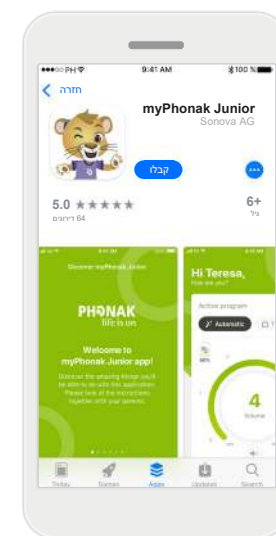

הורידו את היישום myPhonak Junior
הורידו את היישום מהחנות. לאחר ההתקנה פתחו את myPhonak Junior


צימוד עם מכשירי שמיעה תואמים*

כדי לחבר מכשירי שמיעה התומכים ב-Bluetooth עם myPhonak Junior, בצעו את ההוראות שלהלן.**

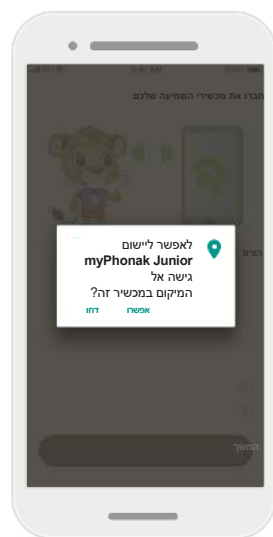

מיקום

במכשירי Android, צריך להפעיל שירותי מיקום כשמבצעים צימוד של מכשירי Bluetooth בפעם הראשונה. לאחר הגדרה ראשונית תוכלו להשבית שוב את שירותי המיקום.

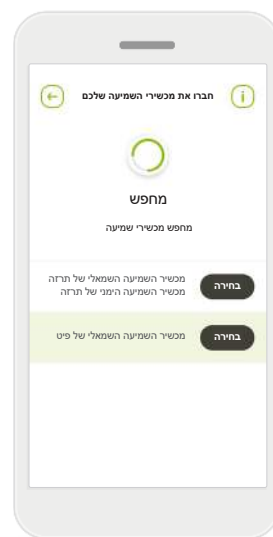


ריבוי מכשירים

אם יזוהו מכשירי שמיעה מרובים, הם יוצגו בהתאם. כדי להדגיש את מכשיר השמיעה שלכם, לחצו במכשיר השמיעה.



בחירה

הקישו על **בחרו** כאשר מכשירי השמיעה שלכם מופיעים ברשימה.

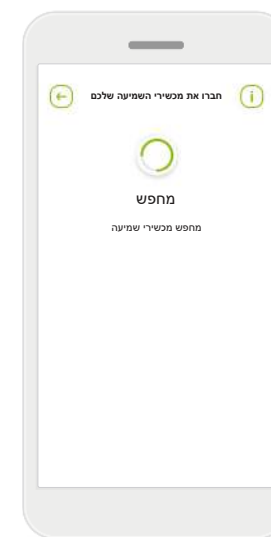

מחפש

היישום מחפש מכשירי שמיעה תואמים, ויציג אותם לאחר שזיהה אותם. זה יכול לקחת כמה דקות.



הוראות צימוד


הקישו על **המשיכו** ופעלו לפי ההוראות עבור מכשירי השמיעה שלכם.

*תאימות עם Sky M, Sky Link M, Naida M, Bolero M, Audéo M, Audéo P ו-Audéo P-i.

**הזרמת Bluetooth: כדי להזרים מוזיקה או לקבל שיחות טלפון במכשירי השמיעה, עברו אל "הגדרות" > Bluetooth והוסיפו את מכשירי השמיעה לרשימת ההתקנים המחוברים. לאחר מכן חזרו ליישום כדי להמשיך בצימוד.

צימוד עם מכשירי שמיעה תואמים*

כדי לחבר מכשירי שמיעה התומכים ב-Bluetooth עם myPhonak Junior, בצעו את ההוראות שלהלן.

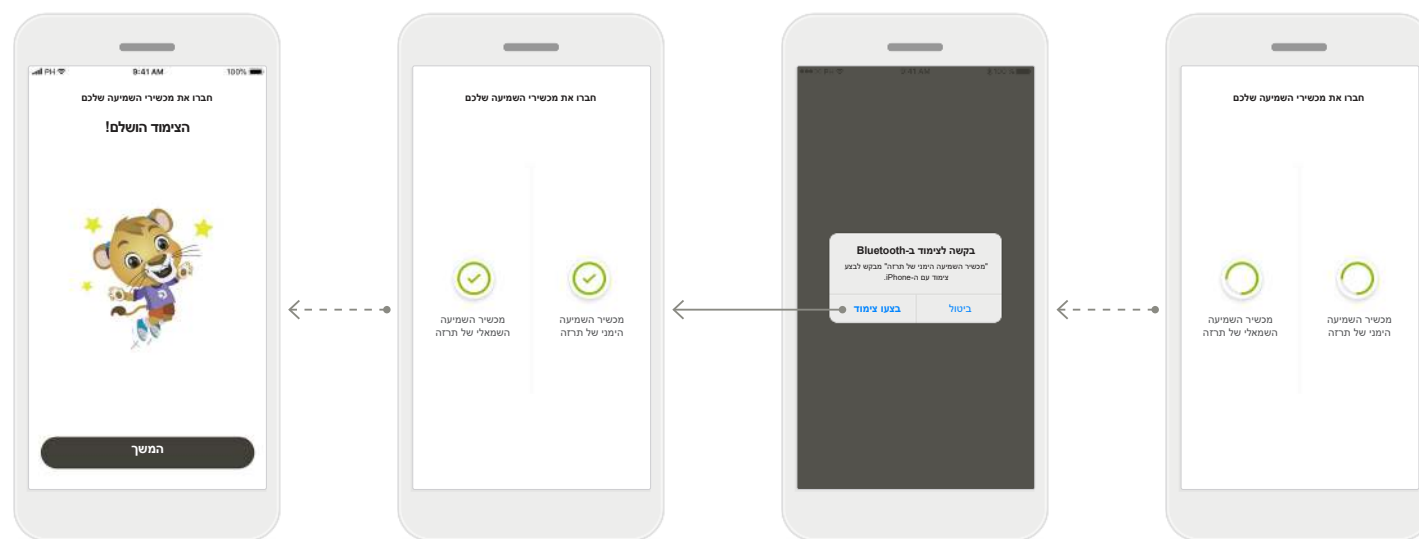

**צימוד מכשירי
השמיעה**
היישום יתחבר לכל
מכשיר שמיעה בנפרד.


**אישור עבור כל
מכשירי השמיעה**
כשמופיעה בקשה,
אשרו את הצימוד על ידי
הקשה על **צימוד** בחלון
הקופץ עבור כל מכשיר
בנפרד.

הצימוד הושלם
הצימוד של שני
מכשירי השמיעה
הסתיים. היישום
ימשיך אוטומטית
לשלב הבא.

ההגדרה הושלמה
אתם מוכנים כעת
להשתמש בכל
התפקודים התואמים
ביישום. הקישו על
המשיכו כדי לגשת
למסך הראשי.

*תאימות עם Audéo L-i, Naída L, Sky L, Audéo P, Naída P, Audéo M, Bolero M, Naída M, Sky Link M, Sky M

כדי להפעיל בקרת הורים עם myPhonak Junior, בצעו את ההוראות להלן.

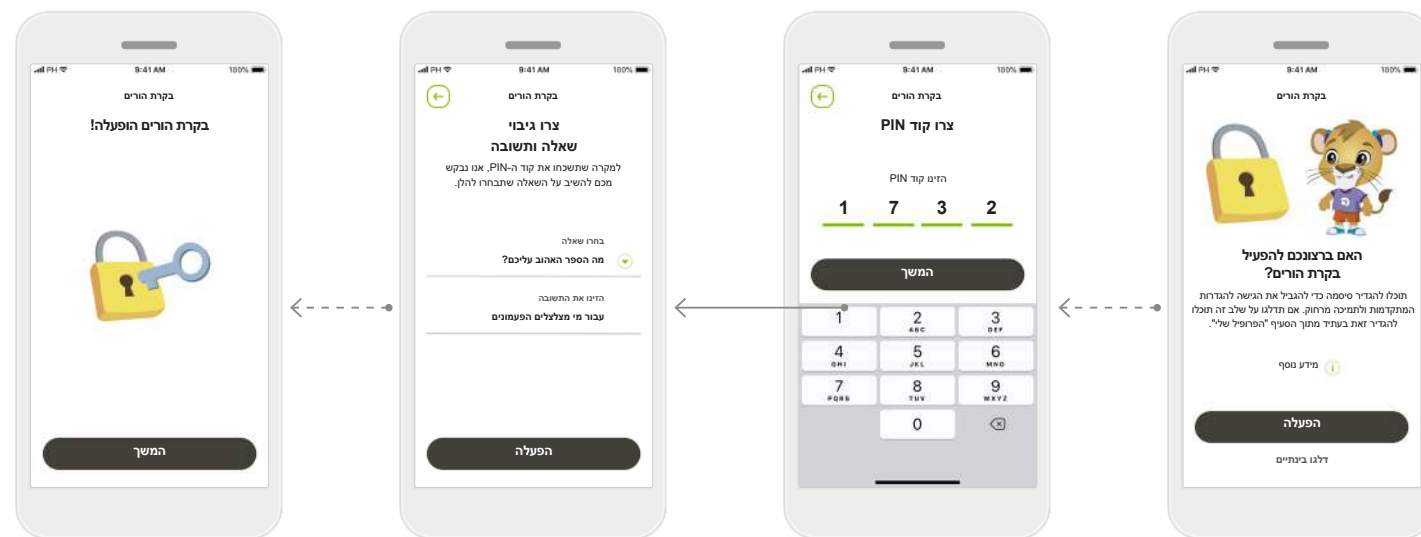

הפעלת בקרת הורים
אפשר להפעיל בקרת הורים במהלך ההצטרפות/ההפעלה הראשונית של היישום, ואפשר גם אחר כך, לפי בחירת ההורה/המטפל ב'הפרופיל שלכם'. פונקציה זו עוזרת בהגבלת הגישה לתכונה "הפעלה אוטומטית" של "תמיכה מרחוק" עבור מכשירי שמיעה נטענים, ובבחירת רוחב פס Bluetooth עבור שיחות טלפון.


צרו קוד PIN
הגדירו קוד PIN בן ארבע ספרות כדי להפעיל בקרת הורים. אפשר לשנות קוד זה או לאפס אותו בכל עת לבחירת ההורה/המטפל.

שאלת גיבוי
בחרו שאלת גיבוי והקלידו את התשובה הנכונה. שאלה זו משמשת לגישה אל פונקציות מוגבלות, במקרה ששכחתם את הקוד בן ארבע הספרות.

בקרת הורים הופעלה
לאחר בחירת שאלת הגיבוי והקלדת התשובה, תוכלו להפעיל את בקרת ההורים. אפשר גם להשבית את בקרת ההורים בתפריט היישום, במידה ואין בכך צורך.

התאמה אישית


כדי להשתמש באפשרויות ההתאמה האישית עם יישום myPhonak Junior, בצעו את ההוראות להלן.

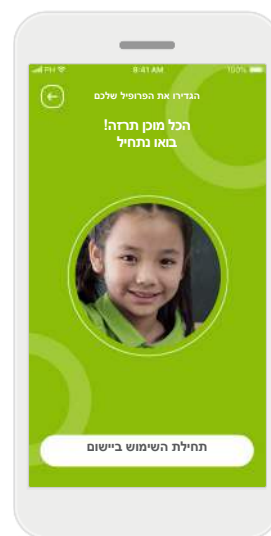

אפשרויות נוספות
אפשרויות התאמה
אישית נוספות כוללות
החלפת צבע ערכת
הנושא של רקע היישום,
ושינוי הצבע של מכשירי
השמיעה הווירטואליים
והוק המכשיר



תמונת פרופיל משתמש
בחרו תמונת פרופיל.
אפשר לדלג על שלב זה
ולהגדיר אותו מאחור יותר
במקטע 'הפרופיל שלכם'.

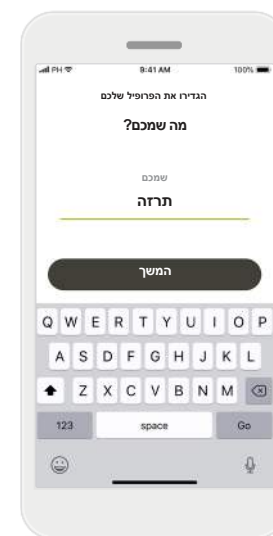


שם פרופיל משתמש
בחרו שם משתמש.



התחלת התאמה אישית
אפשר להתחיל את
ההתאמה האישית במהלך
ההצטרפות, ואפשר גם
אחר כך דרך 'הפרופיל
שלכם' או מסך הבית.

פתרון בעיות בצימוד

שגיאות אפשריות בתהליך ההגדרה.
למידע נוסף לפתרון בעיות, בקרו בדף התמיכה של Phonak.

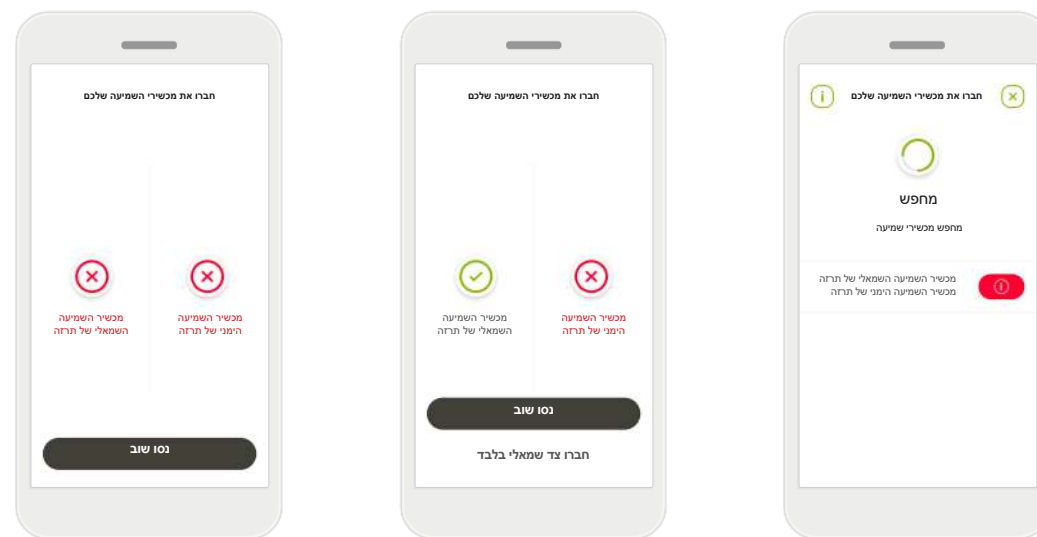

ההתחברות לשניהם נכשלה

הקישו על **נסו שוב** כדי להתחיל מחדש את תהליך הצימוד ופעלו לפי ההוראות.

שגיאה בחיבור למכשיר שמיעה

אם נכשל הצימוד לאחד ממכשירי השמיעה, תוכלו לבצע אחת מהאפשרויות הבאות:

1. הקישו על **נסו שוב** כדי להתחיל מחדש את תהליך הצימוד.
2. המשיכו עם רק אחד מתוך שני מכשירי השמיעה בלבד.

מכשירים לא תואמים

היישום לא מסוגל להתחבר למכשירים, משום שאינם תואמים. למידע נוסף, צרו קשר עם קלינאי התקשורת שלכם.

תצוגה ראשית של שליטה מרחוק

פונקציונליות זמינה בכל מכשירי השמיעה.



רמת סוללה נמוכה
אם רמת טעינת הסוללה נמוכה מ-20%, הסמל ישנה צבע לאדום. כדאי לשקול לטעון בהקדם את מכשירי השמיעה.



השתקה
ניתן להשתיק את מכשירי השמיעה על-ידי לחיצה על הסמל **השתקה**.




מידע
תוכלו לגשת למידע נוסף על תכונות מסוימות באמצעות לחיצה על הסמל **i**.



כונן הגדרות
תצוגת ההגדרות נותנת לכם גישה לתכונות הבאות:

- הפחתת רעש
- מיקוד דיבור

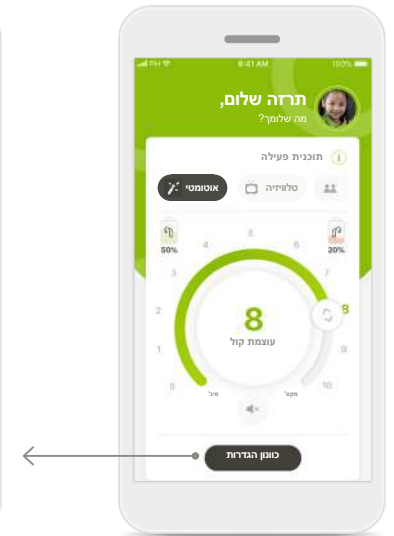


כונן עוצמת קול במכשיר שמיעה
הזיזו את גלגל המחוון כדי לשנות את עוצמת הקול.


החלפת התוכנית הפעילה
הקישו על התוכניות הזמינות כדי לכוון לסביבת האזנה ספציפית. התוכניות הזמינות תלויות באופן שבו קלינאי התקשורת שלכם הגדיר את מכשירי השמיעה שלכם.

פעילות תמיכה מרחוק


אם אתם משתמשים בנתונים סלולריים, ייתכן שהדבר כרוך בתשלום לספק הסלולרי. בדקו עם ספק שירות הטלפון שלכם לפני התחלת פעילות תמיכת Phonak מרחוק. פעילות תמיכה מרחוק תשתמש בכ-56 MB לשיחת וידאו באורך 10 דקות, בעוד שיחה קולית תשתמש בכ-30 MB.

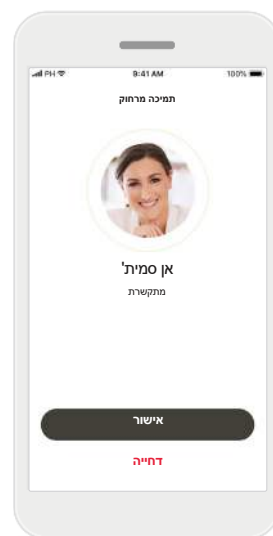


קבלת שיחות וידאו
היישום יחבר אתכם אל קלינאי התקשורת. הקישו על **אישור** כדי לקבל את השיחה מקלינאי התקשורת שלכם.

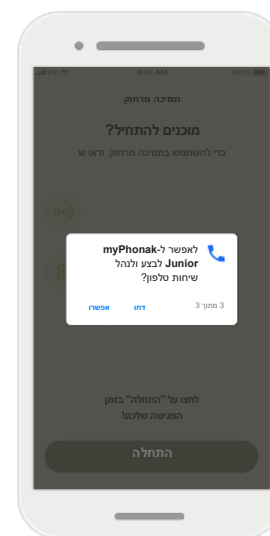

גישה לשיחות myPhonak
אם ברשותכם טלפון חכם של Android הקישו על **אפשר** כדי לתת ליישום myPhonak Junior הרשאה לבצע ולנהל שיחות טלפון.

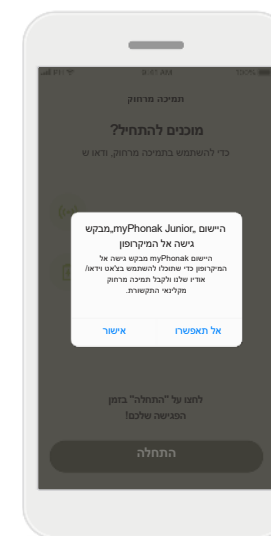

גישה למצלמה ולמיקרופון
לחצו על **אישור** כדי לאפשר ליישום myPhonak Junior לגשת למצלמה ולמיקרופון.

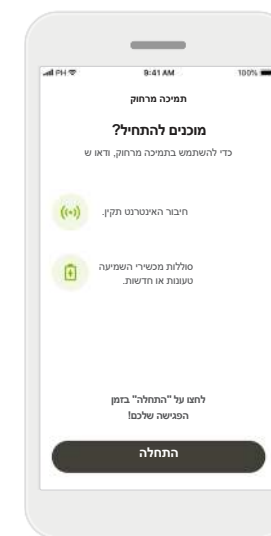


התחלת פעילות תמיכה מרחוק
בזמן הפגישה, פתחו את myPhonak Junior והקישו על **התחלה** כדי ליידע את קלינאי התקשורת שאתם מוכנים לפגישת התמיכה מרחוק של Phonak.

פעילות תמיכה מרחוק

תוך כדי הפעילות, ניתן להתאים אישית את החוויה על ידי הפעלה או כיבוי של הווידאו או השמע שלכם, לפי מה שתרצו.



הגדרות חדשות נשמרו
מכשירי השמיעה יושתקו לזמן קצר במהלך תהליך החיבור ובמהלך שמירת ההגדרות אל מכשירי השמיעה. תוכלו לראות את המצב על-גבי המסך.

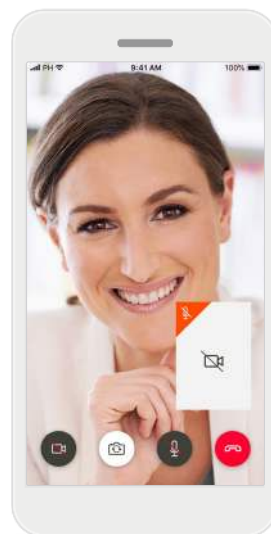

אין וידאו
אם ברצונכם להסתיר את הווידאו, ניתן להשבית את הווידאו בלחיצה על הלחצן.



מכשירי שמיעה מחוברים
אם קלינאי התקשורת שלכם צריך להתחבר למכשירי השמיעה שלכם, ניתן לעשות זאת מרחוק באמצעות הטלפון החכם. קלינאי התקשורת שלכם יידע אתכם מתי הוא או היא יתחברו למכשירי השמיעה שלכם.



שיחה מתנהלת
עכשיו אתם מחוברים אל קלינאי התקשורת שלכם.



מתחיל שיחת וידאו
לאחר מספר שניות תמונת הווידאו תוגדר ותוכלו לראות את קלינאי התקשורת שלכם.


מכשירי השמיעה שלי

פונקציונליות שתלויה באופן התכנות של מכשירי השמיעה ובאביזרים האלחוטיים שברשותכם.




זמן שימוש*

'זמן השימוש' מציג כמה זמן השתמשתם בכל אחד ממכשירי השמיעה על בסיס יומי וחודשי. מכשירי שמיעה עם סוללות נטענות מספקים את המידע הרב ביותר על זמן השימוש.

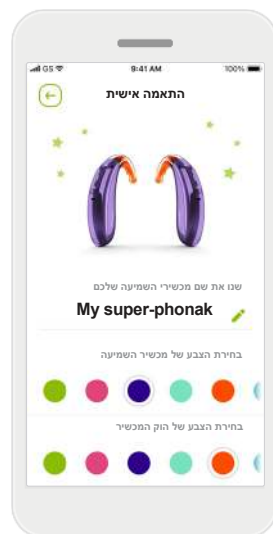

התאמה אישית*

ניתן לשנות את הצבע של מכשירי השמיעה, הוק המכשיר ושם המכשיר כפי שהם המוצגים ביישום.

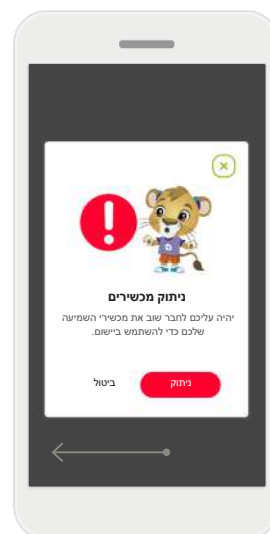


ניתוק מכשירים

אפשר להסיר את מכשירי השמיעה באמצעות לחיצה על **ניתוק**. שימו לב כי בעשותכם כן, יהיה עליכם לצמד את מכשירי השמיעה שלכם שוב כדי להשתמש ביישום.



נעילת הורים

בקרת הורים יכולה להגן על ילדים קטנים מפני ניתוק מכשירי השמיעה שלהם בשוגג.

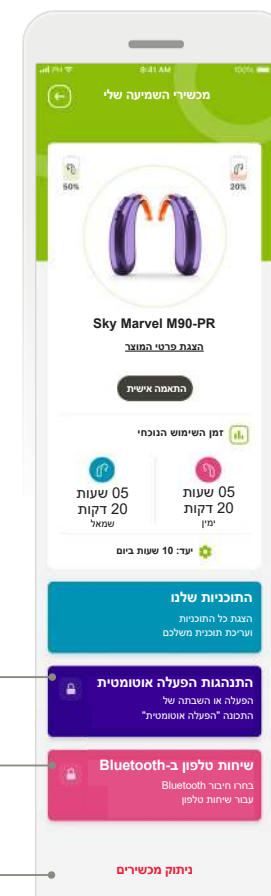

מכשירי השמיעה שלי

המסך 'מכשירי השמיעה שלי' מספק מידע חשוב על מצב הסוללה (למכשירים נטענים), סוג מכשירי השמיעה, התקנת רישיונות Roger, זמן השימוש, 'התכניות שלי', התנהגות הפעלה אוטומטית ושיחות טלפון ב-Bluetooth. כאן אפשר גם לבצע התאמה אישית למראה של מכשירי השמיעה.

מידע חשוב בנושא בטיחות

קראו את מידע הבטיחות הרלוונטי בעמודים הבאים לפני השימוש ביישום.

השימוש המיועד:

שימוש מיועד ביישום הינו בחירה, כוונן ושמירה של פונקציות מכשיר שמיעה קיימות, גישה למידע מצב ותקשורת בין משתמש הקצה וקלינאי התקשורת, באופן אלחוטי בצורה מוחשית.

אוכלוסיית מטופלים מיועדת:

אוכלוסיית המטופלים המיועדת לפתרון זה כוללת משתמשי קצה (אנשים רגילים) המעריכים נוחות, כמו היכולת למיטוב מכשירי השמיעה שלהם במצבים רלוונטיים ומציאותיים, והיכולת לגמישות של הימנעות מהגעה למרפאה לצורך כווננים, והרוצים להיות מעורבים בשיתוף החוויות שלהם.

• פרופיל יעד:

ראו עמוד 2 למידע מפורט

המדריך למשתמש עבור כל גרסאות היישום בכל השפות הרלוונטיות זמין בגרסה אלקטרונית דרך דף האינטרנט. כדי לגשת למדריכים למשתמש, בצעו את הפעולות הבאות:

- לחצו על <https://www.phonak.com/en-int/support> ובחרו את המדינה הרלוונטית
- עברו אל "תמיכה" (Support באנגלית) או שווה ערך בשפה המתאימה
- עברו אל "מדריכים למשתמש" (User Guides באנגלית) או שווה ערך בשפה המתאימה
- עברו אל "יישומים" (Apps באנגלית) או שווה ערך בשפה המתאימה
- בחרו "יישום myPhonak Junior"

לחלופין, אפשר לגשת לגרסה הנוכחית של המדריך למשתמש ב-myPhonak Junior ישירות מתוך היישום על-ידי ניווט לסעיף "תמיכה", ולאחר מכן הקשה על הכרטיס שנקרא "מדריך למשתמש". המדריך למשתמש ייפתח בחלון דפדפן חיצוני.

הודעת אבטחה

נתוני מטופלים הם נתונים פרטיים וחשוב להגן עליהם:

- ודאו שהטלפונים החכמים מעודכנים בעדכוני האבטחה האחרונים של מערכת ההפעלה. הפעילו עדכונים אוטומטיים.
- ודאו שגרסת היישום המותקנת עדכנית
- השתמשו רק ביישומים מקוריים של Sonova מחנויות רשמיות עם מכשירי השמיעה שלכם.
- התקינו רק יישומים מהימנים מחנויות רשמיות
- הקפידו להשתמש בסיסמאות חזקות ולשמור על סודיות הפרטים שלכם
- נעלו את הטלפון באמצעות קוד PIN ו/או אמצעי ביומטרי (למשל טביעת אצבע, זיהוי פנים) והגדירו את הטלפון להינעל באופן אוטומטי לאחר מספר דקות ללא פעילות.
- ודאו שהיישומים המותקנים קיבלו רק את ההרשאות הדרושות להם
- הימנעו מיצירת צימוד Bluetooth עם מכשירי השמיעה שלכם במקום ציבורי. זאת בשל הסיכון להפרעות בלתי רצויות מצד גורם שלישי. מומלץ לבצע את צימוד Bluetooth בבית.
- אל תשתמשו בטלפונים פרוצים
- הקפידו לשמור על הנתונים באופן בטוח בכל עת. שימו לב שרשימה זו אינה כוללת הכל.
- בעת העברת נתונים דרך ערוצים לא בטוחים, שלחו נתונים אנונימיים או מוצפנים.
- הגנו על גיבויי הנתונים של הטלפון החכם שלכם לא רק מפני איבוד נתונים אלא גם מפני גניבה.
- הסירו את כל הנתונים מטלפון חכם שאינו משמש אתכם עוד או שמיועד להשלכה.

מידע חשוב בנושא בטיחות

קראו את מידע הבטיחות הרלוונטי בעמודים הבאים לפני השימוש ביישום.

תחזוקת תוכנה:

אנו מנטרים כל העת את המשוב מהשטח. אם אתם נתקלים בבעיות כלשהן עם גרסת היישום האחרונה, צרו קשר עם נציג היצרן המקומי ו/או שלחו משוב בחנות היישומים Appstore או Google Play Store.

התוויות:

שימו לב, ההתוויות אינן נגזרות מהיישום לנייד, אלא ממכשירי השמיעה התואמים. ההתוויות הקליניות הכלליות לשימוש במכשירי שמיעה ואיזון טינטון הן:

- קיום ליקוי שמיעה
- חד-צדדי או דו-צדדי
- הולכתי, תחושת-עצבי או מעורב
- קל עד חמור
- קיום טינטון כרוני (רק עבור מכשירי שמיעה המציעים איזון טינטון)

התוויות נגד

שימו לב, התוויות הנגד אינן נגזרות מהיישום לנייד, אלא ממכשירי השמיעה התואמים. ההתוויות הקליניות הכלליות לשימוש במכשירי שמיעה ואיזון טינטון הן:

- ליקוי שמיעה אינו בטוח ההתאמה של מכשיר השמיעה (למשל הגבר, תגובת תדרים)

- טינטון חמור
- עיוות של האוזן (למשל תעלת אוזן סגורה, היעדר אפרכסת)
- ליקוי שמיעה עצבי (פתולוגיות retro-cochlear כגון היעדר או אי פעילות של עצב שמיעה)

הקריטריונים העיקריים להפניית מטופל לקבלת חוות דעת רפואית או של מומחה אחר ו/או לטיפול הם:

- עיוות גלוי לעיין של האוזן, מולד או טראומטי.

היסטוריה של ניקוז פעיל מהאוזן ב-90 הימים הקודמים

- היסטוריה של ליקוי שמיעה פתאומי או מתקדם במהירות באוזן אחת או בשתייהן ב-90 הימים האחרונים

- סחרחורות חמורות או כרוניות

- פער הולכת אוויר-עצם שווה או גדול

מ-15 dB ב-500 Hz, 1,000 Hz ו-2,000 Hz

- עדות נראית לעין של הצטברות שעוות אוזן

משמעותית או גוף זר בתעלת האוזן

- כאבים או אי-נוחות באוזן

- חזות חריגה של עור התוף ותעלת האוזן, כמו למשל:
 - דלקת של תעלת השמע החיצונית
 - נקב בעור התוף
 - תופעות חריגות אחרות שקלינאי התקשורת סבור שהן מהוות בעיה רפואית

קלינאי התקשורת יכול להחליט שאין צורך בהפניה או שזו אינה הפתרון המיטבי עבור המטופל כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

- כאשר יש עדויות מספיקות לכך שהמצב נבדק ביסודיות על-ידי מומחה רפואי וסופק כל טיפול רפואי אפשרי.
- המצב לא החמיר או השתנה משמעותית מאז הבדיקה ו/או הטיפול הקודמים
- אם המטופל נתן הסכמה מודעת וקיבל החלטה כשירה לא להיענות לעצה של פניה לקבלת חוות דעת רפואית, מותר להמשיך ולהמליץ על מערכות מכשירי שמיעה מתאימות בכפוף לשיקולים הבאים:
- להמלצה לא יהיו השפעות שליליות על בריאותו או איכות חייב של המטופל
- הרשומות מאשרות שנשקלו כל השיקולים הדרושים לתוצאה מיטבית עבור המטופל. במידה ונדרש משפטית, המטופל חתם על כתב ויתור כדי לאשר שייעוץ ההפניה לא התקבל ושזוהי החלטה מיועדת.

מידע חשוב בנושא בטיחות

קראו את מידע הבטיחות הרלוונטי בעמודים הבאים לפני השימוש ביישום.

הגבלות על השימוש

השימוש ביישום מוגבל ליכולות של המכשירים התואמים.

תופעות לוואי

שימו לב, תופעות הלוואי אינן נגזרות מהיישום לנייד, אלא ממכשירי השמיעה התואמים. קלינאי התקשורת שלכם יכול לפתור או להפחית תופעות לוואי פיזיולוגיות של מכשירי שמיעה, כגון טינטון, סחרחורת, הצטברות שעווה, לחץ, הזעה או לחות רבים מדי, שלפוחיות, גירוד ו/או פריחה, תחושת אטימות או מלאות, ונהשלכות שלהן כגון כאבי ראש ו/או כאבי אוזניים. מכשירי שמיעה רגילים עלולים לחשוף מטופלים לרמות חשיפת רעש גבוהות יותר, שעלולות לגרום לתזוזת ערכי סף בתחומי התדרים המושפעים מטראומה אקוסטית.

יתרונות

היישום תורם למשתמשים המיועדים בכך שהוא מספק את האפשרות לבצע התאמות במסגרת הטווח המותר על פי ההתאמה הראשונית.

היישום מספק למשתמשים המיועדים דרך נוחה להתחבר אל קלינאי התקשורת ולתקשר איתו לצורך כווננים של מכשירי השמיעה מרחוק.

כל אירוע חמור שהתרחש בהקשר של היישום, חייב להיות מדווח לנציג היצג ולרשות המתאימה בארץ המגורים. אירוע חמור מתואר ככל אירוע אשר הוביל באופן ישיר או עקיף, או עשוי היה להוביל או עשוי להוביל לכל אחד מהמצבים הבאים:

- א. מוות של מטופל, משתמש או אדם אחר
- ב. פגיעה חמורה זמנית או קבועה במצבו הבריאותי של מטופל, משתמש או אדם אחר
- ג. איום חמור על בריאות הציבור

מידע חשוב בנושא בטיחות

קראו את מידע הבטיחות הרלוונטי בעמודים הבאים לפני השימוש ביישום.



אתם האחראים לשימוש בטלפון החכם האישי. עליכם לנקוט בזהירות בעבודה עם הטלפון החכם ובשימוש ביישום.



ההפחתה בהגברה או הגברת מנגנון סינון הרעש עשויים לבטל את הנגישות השמיעתית של אותות בטיחות או אזהרה רלוונטיים. מצב זה עלול לגרום למצבים מסוכנים.



לקבלת עותק מודפס בחינם של הוראות השימוש, יש לפנות לנציג המקומי של Sonova. יישלח עותק תוך שבעה ימים.



אם מכשירי השמיעה לא מגיבים למכשיר, עקב הפרעת שדה חריגה, התרחקו מהשדה המפריע.











אם מכשירי השמיעה אינם מגיבים, בדקו אם מכשירי השמיעה פועלים וכי הסוללה אינה ריקה.



הפעילו את Bluetooth. יש להפעיל את Bluetooth כדי לחבר את מכשירי השמיעה.

הסבר על הסמלים

	סמל זה מציין שחשוב שהמשתמש יקרא וייקח בחשבון את המידע הרלוונטי שבמדריך זה למשתמש.
	סמל זה מציין שחשוב שהמשתמש יתייחס להודעות האזהרה הרלוונטיות שבמדריך זה למשתמש.
	מידע חשוב על העבודה עם המוצר ובטיחותו.
	עם הסמל של CE, Sonova AG מאשרת שמוצר זה מבית Phonak עומד בדרישות הדירקטיבה למכשור רפואי 93/42/EEC. סימן CE הוחל בשנת 2021. המספר שלאחר הסמל של CE תואם לקוד של המוסדות המוסמכים אשר נתנו ייעוץ במסגרת הדירקטיבות הנזכרות לעיל.
	מציין את הנציג המורשה בקהילה האירופאית. EC REP הוא גם היבואן לאיחוד האירופי.
	מציין שההתקן הוא התקן רפואי.
	סמל משולב של "יצרן התקן רפואי" ו"תאריך ייצור", כפי שמוגדר בתקנה האירופאית 2017/745 (EU) שם, כתובת, תאריך
	חיוי על כך שהוראות שימוש אלקטרוניות זמינות. אפשר למצוא את ההוראות באתר phonak.com/junior/userguide



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Germany



2021-2023 Sonova AG © V3.01/2023-07/NLG כל הזכויות שמורות

מדריך למשתמש זה מתאים ל-1.2 myPhonak Junior ותת-גרסאות מאוחרות יותר של יישום 1 myPhonak Junior.
לגרסה קודמת של המדריך למשתמש ביישום צרו קשר עם הנציג המקומי או עיינו באתר האינטרנט.