

Phonak ActiveVent™




ליהנות מכל העולמות
ללא פשרות

A Sonova brand

PHONAK
life is on

כיצד זה עובד?

בתוך רמקול ה-ActiveVent™ מצויה דיסקית קטנה אשר משנה את מיקומה באופן אוטומטי בהתאם לניתוח מאפייני הסביבה הנעשה במחשב (הצ'יפ) של המכשיר. במצבים שקטים פתח האוורור של הרמקול במצב פתוח מה שמאפשר שמיעה טבעית ונעימה של הסביבה והקול העצמי. במצבים רועשים ובזמן הזרמת בלוטות' - פתח האוורור במצב סגור, מה שמאפשר הנחתה אופטימאלית של רעשי הסביבה והבנת דיבור מיטבית.

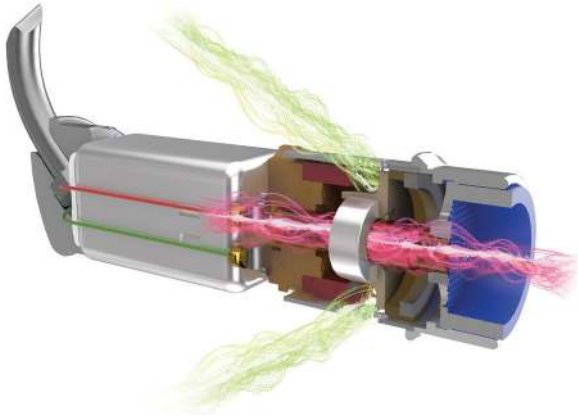

שינויים אלה של פתח האוורור מתרחשים באופן אוטומטי לחלוטין, ע"י מערכת ההפעלה המתקדמת Phonak AutoSense OS™ 4.0.

באמצעות הוספת אביזר זה אל מכשירי השמיעה ניתן ליהנות מקול עצמי נח ונעים מצד אחד, ומהבנת דיבור מרבית על רקע רעש ואיכות צליל במדיה שלא חוויתם עד היום מצד שני. פנו אל קלינאי התקשורת שלכם כדי לבדוק האם רמקול ActiveVent™ Phonak עשוי להתאים לכם.

מכשירי השמיעה המתקדמים של Phonak מאפשרים חווית שמיעה טבעית ואיכותית יותר מתמיד.

אנו ב-Phonak שואפים תמיד להיות בקדמת הטכנולוגיה ולפתח את פתרונות השמיעה המתקדמים ביותר.

בהמשך לסדרת מכשירי השמיעה המהפכניים Phonak Audeo Paradise™ אנו גאים להציג את **Phonak ActiveVent™ - הרמקול החכם.**

רמקול ActiveVent™ הוא הרמקול החכם הראשון מסוגו, אשר משנה את פתח האוורור שלו באופן אוטומטי ודינמי בהתאם לסביבה בה הוא נמצא.

השילוב בין רמקול Phonak ActiveVent™ לבין מכשירי שמיעה מסדרת Phonak Audeo Paradise™ מאפשר יתרון מובהק במצבי היום יום כגון:

- תחושת צליל טבעית בקול עצמי ובמגוון סביבות².
- הבנת דיבור טובה יותר ברעש².
- מודעות טבעית יותר לצליל ומיקום במרחב¹.
- איכות קול מיטבית בשמיעה של מדיה.

התאמת רמקול ActiveVent™ מתאפשרת תחת תנאים מסוימים בתלות בליקוי השמיעה האישי ומבנה אוזן. מומלץ להתייעץ עם קלינאי התקשורת לגבי התאמתכם לאביזר זה! בגלל רגישותו של הרמקול ללחות ולכלוך נדרש להחליפו כל חצי שנה, וכן לבנות עבורו מבנה מיוחד עשוי טיטניום.

1. Winkler, A., Latzel, M., & Holube, I. (2016). Open Versus Closed Hearing-Aid Fittings: A Literature Review of Both Fitting Approaches. Trends in hearing, 20, 1-13 <https://doi.org/10.1177/2331216516631741>

2. Latzel, M & Hobi, S (2021) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News in preparation. Expected end 2021.

עבורנו בפונאק

שמיעה טובה מהווה איכות חיים

אנו בפונאק מאמינים, ששמיעה טובה היא יותר מפשוט "לשמוע טוב". שמיעה טובה היא הבסיס והתנאי לבריאות חברתית-רגשית, קוגניטיבית וגופנית.

כאשר אנו אומרים:

שמיעה טובה מאפשרת איכות חיים טובה-

אנו מתייחסים לתמונה הרחבה, ומעניקים טיפול בשמיעה כבסיס לאיכות החיים והבריאות הכללית של לקוחותינו.

בריאות חברתית-רגשית



בריאות קוגניטיבית



בריאות גופנית



פונאק ישראל

נתיב האור, פארק מדעי החיים, חיפה, מיקוד 3508510

info@steiner.co.il | www.steiner.co.il

1-700-500-315
